

INDIBA®
revitalizing lives



ONA

1

2

3



1

2

3



① Idrodermoabrasione
Manipolo *Cleansing*
(ONA handpiece)
► SOLUZIONI PEEL

② Elettroporazione + LED
Manipolo *Infuse*
(ONA EP handpiece)
► SIERO IDRATANTE ONA

③ Elettroterapia a bassa
frequenza + massaggio
Manipolo *Workout*
(ONA E handpiece)
► GEL ONA SPECIFICO

ONA infrange le regole.

Un dispositivo per il viso INDIBA® che combina idrodermoabrasione (doppio peeling), elettroporazione, LED ed elettroterapia a bassa frequenza, per portare la pelle a un nuovo livello di salute e purezza.

ONA è piacere, benessere, giovinezza e perfezione. Progettata per ottimizzare e potenziare la qualità e la struttura della tua pelle.

Vantaggi chiave

- Esfolia, pulisce ed elimina le impurità
- Idrata in profondità
- Illumina e uniforma l'incarnato della pelle
- Aumenta il tono muscolare contribuendo a migliorare il contorno del viso
- Migliora l'aspetto generale della pelle

Tecnologia

In INDIBA®, l'innovazione è la chiave per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

ONA è progettato per lavorare con diverse tecnologie:

○ PEELING CHIMICO

Elimina il sebo e le impurità della pelle, mentre apportiamo attivi anti-età applicando le nostre soluzioni ON.

○ PEELING MECCANICO

Rimuove e pulisce le impurità con la forza della pressione esercitata dal vuoto (da 15 kPa a 80 kPa).

○ ELETTROPORAZIONE + LED

Aumenta la penetrazione dei Principi Attivi attraverso pori temporanei che si generano nelle cellule grazie agli impulsi ad alta tensione in tempi brevi.

○ ELETTROTERAPIA A BASSA FREQUENZA

La bassa frequenza (1kHz) modulata contribuisce al movimento del muscolo in modo controllato, al fine di tonificare la struttura del viso.




ONA

PULISCE

IDRODERMOABRASIONE

Peeling chimico+ meccanico

Permette di eliminare i punti neri e le impurità, utilizzando una soluzione speciale che viene erogata con grande potenza e successivamente aspirata con la nostra testina radiale, senza danneggiare la pelle

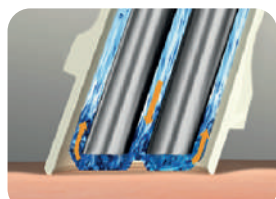

PRESSIONE DEL VUOTO



Pulizia ed esfoliazione con la pressione del vuoto



Pulizia profonda



Penetrazione efficace delle soluzioni

Soluzioni ON1, ON2 e ON3



ON1 AHA

Formula creata da una miscela di alfa-idrossiacidi (AHA) di origine naturale ed estratti lenitivi e rigeneranti, appositamente sviluppata per esfoliare, pulire e curare in profondità la pelle.



ON2 BHA

Formula creata per purificare e rigenerare la pelle con acido salicilico (BHA), estratto di salice e altri attivi lenitivi e rigeneranti, indicata per il trattamento di pori ostruiti e imperfezioni della pelle. Ideale per la zona T.



ON3 Complesso Anti-età

Formula sviluppata specificamente per ripristinare la funzione barriera, idratare in profondità e illuminare la pelle grazie a una miscela di acido ialuronico, peptidi rigeneranti ed estratti vegetali con effetto anti-età.

Testine di trattamento



Le soluzioni ON1, ON2 e ON3 circolano radialmente attraverso le testine di trattamento monouso, disponibili in dimensioni piccole e grandi, per personalizzare il trattamento in base al tipo di pelle o alla zona da trattare.

Questo movimento radiale consente di pulire il poro in profondità, senza danneggiare la pelle.



THREE
TWO
ON1

VEICOLA E POTENZA

SINERGIA TECNOLOGICA

Elettroporazione + LED

Aumenta e accelera la penetrazione degli attivi del Siero idratante ONA fino a 5mm di profondità, attraverso dei canali temporanei che si creano destabilizzando la membrana cellulare grazie agli impulsi ad alto voltaggio.

In questo processo non si danneggiano né si alterano la struttura biologica e la funzione cellulare.



Efficace penetrazione del siero idratante ONA



Idratazione della pelle

Fototerapia efficace


Le diverse lunghezze d'onda delle luci a LED, creano una sinergia con l'elettroporazione, potenziando i risultati.



LED BLU
Effetto lenitivo decongestionante sulle pelli con tendenza grassa o acneica

LED ROSSO
Stimola la creazione di collagene, con un potente effetto anti-età

LED VIOLA
Effetto combinato (blu + rosso)

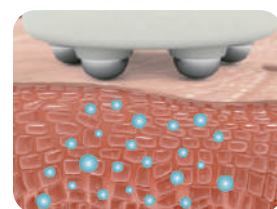

Siero Idratante ONA

Siero concentrato con potente effetto anti-età grazie al suo contenuto di estratti vegetali idratanti e riparatori, acido ialuronico a medio peso molecolare e peptidi che stimolano la produzione di collagene e rafforzano la funzione barriera della pelle.

Il Siero idratante ONA è stato specificamente formulato da INDIBA® con ingredienti attivi di altissima qualità.

Tra i suoi ingredienti vi sono:

- **Acido ialuronico a medio peso molecolare**

Acido ialuronico con una dimensione specifica per la stimolazione delle cellule epiteliali danneggiate e/o invecchiate, che rende la pelle più morbida, uniforme e liscia.

- **Betaina**

Grazie alle sue proprietà lenitive, rafforza la barriera cutanea aumentando l'integrità e la coesione cellulare, riducendo gli arrossamenti e proteggendo la pelle dall'esposizione a sostanze nocive.

- **Peptidi anti-età**

Piccoli peptidi endogeni derivati dalla proteolisi della matrice extracellulare, in grado di regolare, riparare e rigenerare la pelle danneggiata e/o invecchiata.




THREE
TWO
ONA

AGISCE

EFFETTO TOTALE ANTI-ETÀ

Elettroterapia a bassa frequenza + massaggio

Stimola la muscolatura facciale, contraendo e rilassando ripetutamente il tessuto. Inoltre, riduce la tensione e migliora l'apporto di nutrienti grazie all'aumento della circolazione sanguigna locale.

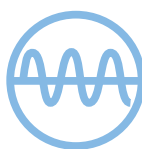

Corrente a bassa frequenza (1 kHz)



Sfere compatte con rotazione a 360°



Migliora l'elasticità della pelle




Massaggio muscolare grazie alla stimolazione profonda




Rigenerazione della pelle, stimolazione muscolare ed eliminazione delle impurità



Promuove una migliore circolazione

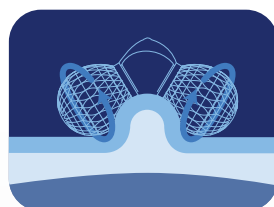

MASSAGGIO

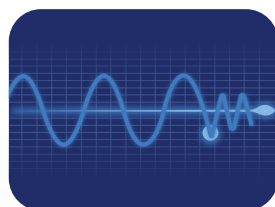

BASSA FREQUENZA (1kHz)

Gel protettivo per elettroterapia ONA

Gel conduttivo appositamente formulato per massimizzare i risultati di ONA, in modo sicuro ed efficace.



THREE
TWO
ONA

THREE
TWO
ONA



Specifiche tecniche

Alimentazione in ingresso	220-240V, 50/60Hz
Fusibile di ingresso	2 xT 10AL 250V
Potenza di consumo	250 Watts
Peso	25 kg (comprese le soluzioni)
Dimensioni	448mm x 438mm x 391mm (Al x An x L)
Display	Touch screen LCD 7 pollici
Manipolo Cleansing	Livello 1~7, Max 630 mmHg
Manipolo Infuse	Livello 0~10, Max 2,0 Vrms (@ 500 ohm)
manipolo Workout	Livello 0~10, Max 3,8 Vrms (@ 500 ohm)



DISTRIBUTORE PER L'ITALIA

ALQUIMIA

Via Armando Vona (zona ASI) snc località Le Lame
03100 Frosinone - Tel. 0775.290668 - alquimiaestetica.it

INDIBA®
revitalizing lives